



2010年5月25日

# 2010年6月より完全義務化 えび・かにアレルギー表示をサポート！！ 20分間で分析可能な簡便検査キット えびかにキャッチャー「マルハニチロ」 を発売！

既に表示義務化されていた「卵」、「乳」、「小麦」、「そば」、「落花生」の5品目に加えて、発症数が多く重篤な症状を引き起こすことが明らかになってきた「えび」と「かに」のアレルギー表示が義務化され、2010年6月より完全施行されます。(株)マルハニチロ食品(本社:東京都千代田区坂井道郎 社長)は、適切なアレルギー表示を迅速にサポートするために、えび・かにアレルギーの簡便検査キットえびかにキャッチャー「マルハニチロ」の販売を2010年5月より開始しました。

アレルギー表示を適切に行うためには信頼性の高い検知法が必要となります。既に弊社では、厚生労働省通知で定められた「アレルギー物質を含む食品の検査方法を評価するガイドライン」に適合し食品中に含まれる甲殻類タンパク質が定量可能なELISAキットである甲殻類キット「マルハ」を2008年4月より販売しています。本キットは定量分析が可能な半面、操作が比較的煩雑で時間が掛かり、食品製造工場などでの原材料混入防止の自主管理の手段としては不向きな面があります。そこで迅速な対応が求められる現場で扱いやすい、検査方法が簡便で約20分間で甲殻類タンパク質を検出可能なイムノクロマト法による検出キットえびかにキャッチャー「マルハニチロ」を開発しました。

## 【商品について】

商品名: えびかにキャッチャー「マルハニチロ」

製造元: 株式会社マルハニチロ食品

発売元: 株式会社ファスマック、和光純薬工業株式会社、生化学バイオビジネス株式会社

キット内容: テストストリップ 20本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL

販売価格: オープン価格

商品特徴:

- ・甲殻類タンパク質を選択的に検出することが可能
- ・食品中に含まれる甲殻類タンパク質を1ppmから検出できる。
- ・甲殻類キット「マルハ」と同じ抗体を使用しているため同キットとの相関性が良好。


ユーザー:

- ・食品メーカーの製造現場や品質管理部門
- ・量販店などの品質管理部門、民間の受託食品検査機関、公的検査機関



【検査方法の概略】

- ①検体（食品試料）をミキサー等で粉碎し、抽出用試薬を用いてタンパク質成分を抽出する。
- ②抽出された溶液にテストストリップを3秒間つける。（右図）
- ③20分間反応させて、テストストリップ上の判定ラインの有無を確認する。

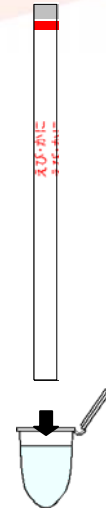

---

報道各位からのお問い合わせ先  
株式会社マルハニチロホールディングス  
広報 IR 部  
Tel 03-3216-0821 Fax 03-3216-0342

---